

OP5

スタンダードな
空圧4軸膝継手



- 中～高活動の歩行速度を変えられる方に
- 伸展と屈曲抵抗が個別に調整可能
- 4軸で高い立位の安定性
- 座位時の突出が少なく長断端やロッキングライナーに最適
- アライメント調整機構付きピラミッド
- 廉価で訓練用にも

推奨足部

プロフレックスシリーズ



バリフレックスシリーズ



義足に加わる衝撃度
中程度～強い




遊脚期制御

空圧シリンダーの屈曲抵抗と
伸展抵抗を個別に調整




アライメントの調整

近位オスピラミッドは回旋と
5mmスライド調整が可能

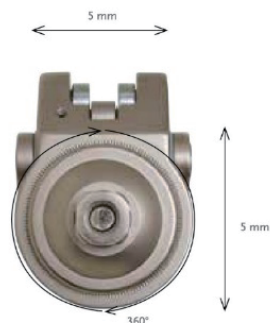

オプション

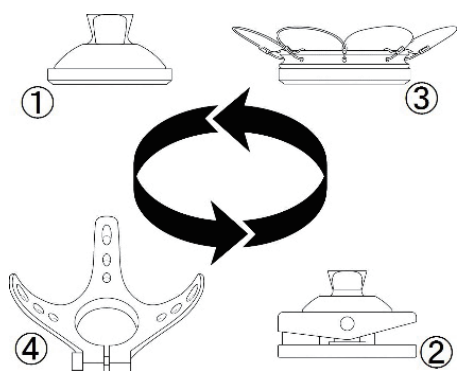


ソケット直結アダプタやIKFアダプタなどが選択可能

- ① 1720180 OP5 with 膝継手近位オスピラミッドアダプタ
令和元年度完成用部品価格 ¥198,400 (オスピラミッドアダプタ 含む)
- ② 1720182 OP5 with 膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付
令和元年度完成用部品価格 ¥232,300
(内訳= OP5 ¥198,400 + アダプタ ¥33,900)
- ③ 1720181 OP5 with ソケット直結ループアダプタ
令和元年度完成用部品価格 ¥217,700
(内訳= OP5 ¥198,400 + アダプタ ¥19,300)
- ④ 1720183 OP5 with 3羽ソケット直結アダプタ
令和元年度完成用部品価格 ¥233,800
(内訳= OP5 ¥198,400 + 3羽アダプタ ¥23,500
+ スクリュートップアダプタ ¥11,900)

技術仕様

①: 全体高	195 mm
②: 構造的高さ	160 mm
③: 膝軸からトップ	18 mm
重量	770 g
最大屈曲角度	145°
材質	アルミニウム
適応体重	125kg

四軸空圧膝継手
オズール OP5
骨格・義足・膝継手・C多軸膝・1遊動式・空圧
令和元年度 完成用部品価格 ¥198,400

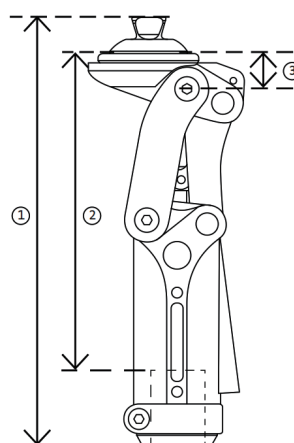

k パシフィックサプライ株式会社
オズール社 義肢部品日本総代理店

ご注文専用電話 072-875-8011
ご注文専用FAX 072-875-8015
お問合せ専用電話 0120-953-467

ホームページ <https://www.p-supply.co.jp/>

オズールカタログWEBサイト
<http://www.p-supply.co.jp/ossur/catalog/>

