

お客様各位

平成29年度

完成用部品新規掲載 のご案内

この度、厚生労働省より、新たに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定」について通知を受けましたので、皆様へご報告いたします。これら新たな指定製品がお客様のQ.O.L.向上の一助になることを心より願っております。

今後とも新たな価値と情報の提供にさらに努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

パシフィックサプライ株式会社



リオニー3 ロック付（3年保証）

幅広いタイプのユーザーへ適合するように設計されました。卓越した安定性と運動性能のバランスが日常生活に安心と自信をもたらします。

磁気粘性（MR）技術は電磁力を利用し、膝継手のなかにある磁性流体の粘度を敏速に変えます。この技術を採用しているリオニー3は、立脚期の安定性に必要な高い抵抗から、遊脚期には抵抗をフリーにし、ダイナミックな動きへ瞬時に切り替えることができます。抵抗の変化は、遅れることなく、生理的な膝関節の自然な機能を再現し、進む方向やスピード、地面の変化に俊敏に正確に反応します。ユーザーは、自分の好きなように歩くことができ、天候にも左右されることがありません。

部品番号：オズール RKN130003

骨格・義足用部品・膝継手・A 単軸膝 1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ制御

完成用部品価格 1,993,000円

- 対象者 大腿切断者
活動レベル：低～中活動者
体重制限：136kg
- 製品仕様 重量：1,630g
全長：236mm
最大屈曲角度：120°
生活防水（全天候対応）
- 保証期間 36ヶ月



リオニー3用バイオニックプロテクタ

リオニー3用のプロテクタです。
外装フォームカバーとして膝継手本体を保護します。
膝継手をまたがないため製品本体の動きを妨げません。
膝立ちした時の衝撃保護や何かに当たった際に本体が傷つくのを予防します。

部品番号：オズール BIC00110

骨格・義足用部品・外装用部品 保護カバー

完成用部品価格 134,700円

- 対象者 リオニー3装着者
- 保証期間 6ヶ月



リオニー3用充電器

リオニー3専用充電器です。
充電ゼロの状態から約3時間で満充電になります。

部品番号：パシフィックサプライ 16180033

骨格・義足用部品・その他 バッテリーキット

完成用部品価格 5,300円

- 対象者 リオニー3装着者
- 保証期間 6ヶ月



*日本での販売は電気用品安全法（PSE）に対応したものに
なりますので、外観は画像とは異なります。

従来のリオニー3よりアップグレード

- 全天候に対応しています。湿度の高い場所や水にぬれる場所での使用*ができます。
- アクチュエーターとジャイロスコップの性能が向上し、立位の安定性と遊脚時のダイナミック性が向上しました。
- 伸展がより強くなめらかになりました。ユーザーの自信が高まります。
- iOSタブレットおよびWindowsのPC向けに新しい設定用アプリが登場しました。

*浸水はさせないでください。また、海水などの塩分を含んだ水や塩素の水にはさらさないでください。



✳ データ

18%

6分間の歩行テストで
歩行距離の増加

36%

6分間の歩行テスト後にユーザーが
「必要と感じる労力レベル」の減少
(BORGスケール*1使用)

9%

Lテスト*2の時間経過後の
平均減少率

制御されたなかで実施された、最近の臨床試験において、リオニー3は、従来のリオニーシリーズや主に比較される他の膝継手より、パフォーマンスが著しく上回るという結果が見られました。具体的には、リオニー3のユーザーは早く、長く歩くことができ、疲れも少なかったことが実証されています。

*1 BORGスケールは、ユーザーの感知する「必要とする労力レベル」を計測します。

*2 機能的運動性を測るLテストは、20mの硬い平面を歩く時間を測るテストです。
(移乗2回と曲がること4回を含む)。

4バーXC

高い負荷が繰り返しかかる作業にも耐性が高い設計の4軸リンク機構を採用した多軸膝継手です。4軸リンク機構のため遊脚期のクリアランスが増加します。内部には油圧制動機構が組込まれており遊脚期の屈曲、伸展抵抗を調整することができます。

部品番号：オズール CKN10000
骨格・義足用部品・膝継手・C 多軸膝 1遊動式 油圧
完成用部品価格 590,500円

- 対象者 大腿切断者。幾何学的安定性があり、立脚期での安定性が高く構造的に非常に低いため、身長の高い方、長断端の方でも使用しやすくなっています。
活動レベル：中～きわめて高活動
体重制限：100kg
- 製品仕様 重量：620g 全長：108mm 最大屈曲角度：110°
- 保証期間 18ヶ月



プロフレックス

足継手に27度という驚異的な可動域があり、従来のカーボン製足部よりも著しく大きな動的なサポートを兼ね備えています。健側の保護を特に重視し開発されています。健常者のバイオメカニクスをほぼ完全に模倣し、健側に対する負荷を11%軽減することが実証されています。

部品番号：オズール PFP0xyyz
骨格・義足用部品・足部・A SACH足部 SACH
完成用部品価格 848,500円

- 対象者 大腿切断・下腿切断者。しっかりと踵接地し、エネルギー蓄積と放出を必要とする切断者に適しています。
活動レベル：低～中活動
適応体重：45kg～125kg
- 製品仕様 重量：920g 高さ：155mm（フットカバー含む／27cm）
- 保証期間 36ヶ月



プロフレックスLP

3枚のカーボン繊維強化プラスチック製のキールを近位部と遠位部で固定した構造で、3枚のキールが積み重なっています。そのため、従来の構造的な高さが低い足部よりも可動域が大きく、蓄積したエネルギーを用いて踏み返しを助けます。

部品番号：オズール PLP0xyyz
骨格・義足用部品・足部・A SACH足部 SACH
完成用部品価格 380,000円

- 対象者 大腿切断・下腿切断者。
活動レベル：低～高活動
適応体重：45kg～166kg
- 製品仕様 重量：646g 高さ：73mm（フットカバー含む／27cm）
- 保証期間 36ヶ月



DPフレクション

油圧式で底背屈を制御する継手ユニットを採用しており、装着者の特性に合わせて油圧バルブの開閉を調整し底屈/背屈を調整できます。

部品番号：オズール FBD0xyyz
骨格・義足用部品・足部・C 多軸足部 多軸
完成用部品価格 350,100円

- 対象者 大腿切断・下腿切断者。踵接地が強くなく、ゆっくりと一定の速度で歩行する低活動の切断者に適しています。
活動レベル：低活動
適応体重：36kg～136kg
- 製品仕様 重量：910g 高さ：138mm（フットカバー含む／27cm）
- 保証期間 36ヶ月



アイスロック544 ユニティプレートキット

股離断、大腿切断、膝離断、下腿切断者用のソケットアダプタとユニティポンプによる吸引を起こすためのバルブプレートのキットです。

部品番号：オズール L-544611
骨格・義足用部品・その他 吸着バルブ
完成用部品価格 61,500円

- 対象者 股離断、大腿切断、膝離断、下腿切断者。
活動レベル：全ての衝撃度の方
体重制限：136kg
- 製品仕様 重量：216g 構造的高さ：25.5mm
- 保証期間 6ヶ月



アイスロック544 排出プレートキット

股離断、大腿切断、膝離断、下腿切断者用のソケットアダプタと排出バルブによる懸垂を得るためのバルブプレートのキットです。

部品番号：オズール L-544621
骨格・義足用部品・その他 吸着バルブ
完成用部品価格 61,500円

- 対象者 股離断、大腿切断、膝離断、下腿切断者。
活動レベル：全ての衝撃度の方
体重制限：136kg
- 製品仕様 重量：216g 構造的高さ：25.5mm
- 保証期間 6ヶ月



アイスロック674 4穴アルミニウム

アイスロック600専用アルミニウム製ピラミッドです。
ラミネーションの際にソケット内に組込み、ロックを支持しピラミッドアダプタを接続する構造物として荷重を支持します。

部品番号：オズール L-674000
骨格・義足用部品・義足調整用部品 コネクタ・ソケットアダプタ・四穴
完成用部品価格 15,700円

- 対象者 股離断・大腿切断・膝離断・下腿切断者。
活動レベル：全ての衝撃度の方
体重制限：100kg
- 保証期間 12ヶ月



アイスロック675 4穴チタン

アイスロック600専用チタン製ピラミッドです。
ラミネーションの際にソケット内に組込み、ロックを支持しピラミッドアダプタを接続する構造物として荷重を支持します。

部品番号：オズール L-675000
骨格・義足用部品・義足調整用部品 コネクタ・ソケットアダプタ・四穴
完成用部品価格 34,200円

- 対象者 股離断・大腿切断・膝離断・下腿切断者。
活動レベル：全ての衝撃度の方
体重制限：166kg
- 保証期間 12ヶ月



i-limb quantumハンド

筋電制御による比例制御式の電動ハンドです。

各指MP関節の屈曲伸張運動を行うモータ5個と母指CM関節の内外転を行う計6個のモータが内蔵されており、把持形態の種類は最大36種類ありますので、生活、就労の各場面に合わせた把持を実現できます。

モータの駆動が生じない場合は固定される落下防止機能や、シグナルを出し続けることで把持力を強めるバリグリップ機能など使用者の負担を軽減しうる機能があります。また、ハンド基部の加速度センサ、プロセッサ、Bluetooth等により、アプリやジェスチャによる把持形態の切り替えも可能です。

部品番号：タッチバイオニクス ILQ-size
殻・義手用部品・その他 電動ハンド

完成用部品価格 2,292,000円

- 保証期間 2年（最大5年まで延長可能）



i-limb quantum用 クイックチェンジリスト

近位部は手先部と手継手を接続するクイックチェンジリストになっており、手先具とリストユニットとの接続が容易に行えます。リストユニットへ取り付けると金属のボールが突出し固定されます。固定された状態でも回旋方向へは調節が可能です。

部品番号：タッチバイオニクス QWD
殻・義手用部品・
その他 リストユニット用部品

完成用部品価格 620,900円

- 保証期間
2年（最大5年まで延長可能）



i-limb quantum用 屈曲リスト

近位部は手先部と手継手を接続するクイックチェンジリストになっており、手先具とリストユニットとの接続が容易に行えます。リストユニットへ取り付けると金属のボールが突出し固定されます。磁石ロックを解除することで、掌背屈角度を5段階で調節することが可能です。また、フリーの状態でも使用することが可能です。

部品番号：タッチバイオニクス FW
殻・義手用部品・
その他 リストユニット用部品

完成用部品価格 967,100円

- 保証期間
2年（最大5年まで延長可能）



i-limb quantum用 スキンアクティブTS

i-limb quantumハンド用のシリコーン製グローブです。本体にグローブを装着し使用することで、本体の保護を行います。

部品番号：タッチバイオニクス QA-xyz
殻・義手用部品・手先具・D 装飾手袋（コスメチックグラブ）
完成用部品価格 24,400円

- 機能
 - ・グローブ表面の摩擦力により、把持を補助
 - ・示指先端についた素材により、タッチパネル操作を行うことが可能

- 保証期間 3ヶ月



i-limb quantum用 スキンナチュラル

i-limb quantumハンド用のシリコーン製グローブです。本体にグローブを装着し使用することで、本体の保護を行います。

部品番号：タッチバイオニクス QN-xyz
殻・義手用部品・手先具・D 装飾手袋（コスメチックグラブ）
完成用部品価格 51,600円

- 機能
 - ・グローブ表面の摩擦力により、把持を補助
 - ・生体に近い外観にすることが可能

- 保証期間 3ヶ月



コーキシャルプラグ

樹脂製Oリング、コーキシャルプラグ、ワッシャー、樹脂製ネジで構成された、i-limb quantum用リストのパーツです。近位部は電極とバッテリーとの接続端子となっており、遠位部はハンドのプラグ接続部となっています。

タッチバイオニクス PL091036
殻・義手用部品・その他 リストユニット用部品
完成用部品価格 35,300円

- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



ラミネーションリング50mm

筋電義手用のリストユニットで、義手支持部と接着する面はプラスチック、手先具のクイックチェンジリストと接する面はアルミニウムです。内側にはカップリングピースを取り付けます。

タッチバイオニクス 89003
殻・義手用部品・その他 リストユニット
完成用部品価格 35,300円

- 機能 ・義手と手先具の固定
・手先具のクイックチェンジリストと固定
- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



カップリングピース

筋電義手のリストユニット用部品です。突起のついたカップリングと、樹脂製のカップリング用Oリングとで構成されます。

タッチバイオニクス PL091032
殻・義手用部品・その他 リストユニット用部品
完成用部品価格 8,900円

- 機能 ・突起部によるクイックチェンジリストのロック
・中心部によるコーキシャルプラグの固定
- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



節電センサー50Hz用

筋電電動義手の筋電センサーキットです。電極、ケーブル、コーキシャルプラグへの端子から構成されます。

タッチバイオニクス PL091050
殻・義手用部品・その他 電極
完成用部品価格 151,000円

- 機能 ・電極がソケット内で感知した筋電信号をコーキシャルプラグを介し、プロセッサへと伝える
- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



スイッチブロック

筋電電動義手の電源スイッチです。バッテリーとスイッチブロック用電源ケーブルとの接続端子、電源スイッチ、充電口で構成されています。

タッチバイオニクス SA069080
殻・義手用部品・その他 スイッチ
完成用部品価格 20,200円

- 機能 ・義手本体の電源のON/OFFの切り替え
・充電器の端子を充電口へ接続すれば、バッテリーの充電が可能
- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



スイッチブロック用バッテリー

筋電電動義手の体外力源です。7.4V、1300mAh、9.6Whのリチウムイオンバッテリーで義手支持部の内ソケットと外ソケットの間に設置します。専用充電器を用いて充電を行います。

タッチバイオニクス PL000192
殻・義手用部品・その他 バッテリー
完成用部品価格 35,300円

- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)




スイッチブロック用電源ケーブル

スイッチブロックからコーキシャルプラグへの接続を行い、端子の変換を行う部品です。ケーブルの両端に異なる形状のカブラーが付属しており、白色の端子をスイッチブロックの端子に、緑色の端子をコーキシャルプラグの端子に接続します。

タッチバイオニクス SA000219
殻・義手用部品・その他 スイッチ用部品
完成用部品価格 7,200円

- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)

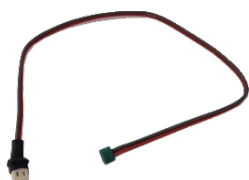

充電器

i-limb quantum/ハンド用の専用充電器で、家庭用コンセントでの充電が可能です。充電器のランプ点灯の種類で充電状況を把握します。義手のスイッチを切った状態で充電を行います。

タッチバイオニクス PL000227(US)
殻・義手用部品・その他 充電器
完成用部品価格 61,700円

- 機能 ・1300mAhのスイッチブロック用バッテリーが約90分で満充電になります。
- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



カーチャージャー

i-limb quantum/ハンド用の専用充電器で、自動車のシガーソケットに対応したDC直流電流用充電器です。義手本体のスイッチを切った状態で充電を行います。

タッチバイオニクス SA000222
殻・義手用部品・その他 充電器
完成用部品価格 22,100円

- 機能 ・車での移動中にバッテリーへの充電が可能
- 保証期間 2年(最大5年まで延長可能)



平成29年度 オズール社既収載完成用部品の価格について

この度、オズール社製品の価格が大幅な引き下げとなりました。その経緯と理由についてご説明いたします。

完成用部品価格は、適用年度の前年9月に各メーカーが「補装具製作所さまへの卸販売価格」を厚生労働省へ申請し、厚生労働省にて補装具製作所さまにおける標準管理費が追加され、翌年4月に告示されます。

弊社が販売するオズール製品はUSドルで輸入しており、申請時期の為替レートによって弊社の申請価格、ひいては完成用部品価格へ大きく影響が出てまいります。そのため、平成28年度の完成用部品価格は前年より大幅に上昇し、オズール社製品を必要とされている方々に非常にお使いいただきにくい、弊社としても誠に心苦しい状況となっております。

本年度の価格申請におきましては、為替変動と合わせ、オズール社と協議・協力し、価格の引き下げに尽力いたしました。この価格引き下げによって、オズール社製品を必要とされるすべての方々にオズール社製品をお使いいただき、より良いリハビリテーションや充実した毎日へつながることを、心より願っております。

パシフィックサプライ株式会社

オズール特設サイトのご案内



2016年10月に完成しました**オズール特設サイト**では検索機能が充実し、最新情報をいち早くご提供しております。
スマホ対応にもなっておりますので、いつでもどこでも製品情報をご確認いただけます。ぜひご活用ください！



<http://www.p-supply.co.jp/app/webroot/sp/ossur/catalog/>

オズールカタログWEB 検索



 **パシフィックサプライ株式会社**

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。