



新商品紹介 オルトトップ®コンフォートケイン



コンフォートケイン誕生秘話 [技術開発者より]


2006年、補助器具相談室長から「手のことを考えた杖を作って欲しい」という想いをぶつけられ開発が始まりました。手のことを考えた杖の必要性の確認をしていく中で見えてきたことはステッキに代表されるアクセサリとしての杖と、高齢者や障がい者が使用する歩行補助杖が、明確に整理されずに市場に供給されており、その為、上肢への配慮がない歩行補助を使用することで負担を与え、身体を壊している方が多くおられるということでした。つまり、障がいによっておこされた問題と、道具によって引き起こされた2次的な問題が2つ存在するということです。この視点に立ち、歩行補助に必要な機能のみを探索し具体化させるのに、開発チームは丸3年ついやしました。その中で試行錯誤を繰り返し完成したのがこの杖です。コンフォートケインは、歩行補助杖の中で上肢への負担が少なく快適に使える杖であると断言できます。

みなさんの周りに杖の握り手を逆さについている人はいませんか。杖を突くことで手首や肘、肩が痛いといっている人はいませんか。そのような場合は、是非オルトトップコンフォートケインをお勧めください。きっとご満足いただけると思います。




5つの機能特性

機能特性 1 手首への負担が少ない

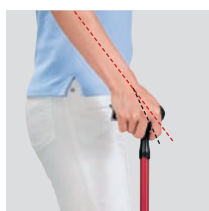

特徴的なヘッド形状とヘッドとシャフトの取り付け位置により、手首への負担を軽減しました。

機能特性 2 強い力で握らなくても良い

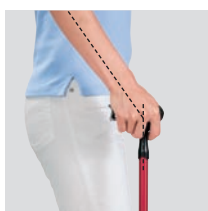

シャフトから手首の中央までの距離が近いので、楽にご利用いただけます。

機能特性 3 ヘッドの形状




ヘッドはマウスを持つ感覚でホールドするので局所的圧迫感をやわらげます。

機能特性 4 連結部の細さ



連結部が細く持ちやすい形状です。

機能特性 5 軽く振り出せる

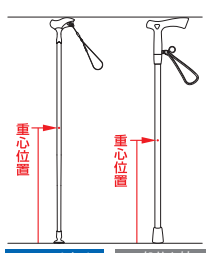



杖の重心位置が高い所にあるので、杖の振り出しが非常に軽いです。

先ゴムの2つの機能性

杖の接地時に、適切に先ゴムがしななって全面接地しますので、安全性と滑りにくさを備えています。



1.容易に全面接地します。

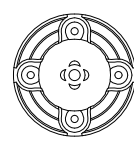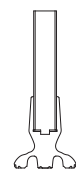

底面のイラスト

2.濡れた床での吸い付きや滑る心配を軽減します。



オルトトップ®コンフォートケイン 一本つえ

品番	38110101	38110102	38110103	38110104	38110105	38110106
色	すみ	かきしぶ	ふじ	わかたけ	きんかん	もみじ
素材	ヘッド:アクリル/ネック部:ポリカーボネイト/シャフト:アルミ					
重量	244g(先ゴム・ストラップ込)					
製造国	日本					
	¥6,510	¥8,190	¥8,190	¥8,190	¥8,190	¥8,190

(税込)

オルトトップ®コンフォートケイン 伸縮式つえ

品番	38110201	38110202	38110203
色	みずかがみ	くり	やまぶき
素材	ヘッド:アクリル/ネック部:ポリカーボネイト/シャフト:アルミ		
高さ調整幅	725~950mm(250mm幅で10段階)		
重量	257g(先ゴム・ストラップ込)		
製造国	日本		

¥9,240(税込)