

UNLOADER ONE[®]

There's only one Unloader.[®]

15を超える臨床研究*で、その有効性が実証されています。

Unloader OA 膝装具は、40年近く業界標準となっています。

Designed with patient compliance in mind.

Unloader One[®] 装具はÖssur独自の3点支持システムを特徴としています。

大腿と下腿のシェルが2つの支点、 Dynamic Force System[™] (DFS) ストラップが3つ目の支点となり、このシステムが患部にかかる圧を分散します。また、体重の増減や腫れなどのボリューム変動に合わせて調整が可能です。

PRODUCT HIGHLIGHTS

- 工具不要の多軸ヒンジ（関節可動域制限用のオプションROMストップ付き）
- 柔軟で薄型の支柱は、患者の体の形に沿うようなデザイン
- Smart Dosingダイヤルにより、衣服の下に装具を装着していても調整可能
- 内張りを洗うことができ、お手入れが簡単
- 色分けされたクイックフィットバックルにより、簡単に装着と脱着が可能



関連動画




Unloader One は付属品や交換部品を用いることで、個々のニーズや解剖学的形状に簡単に調整することが可能です。注文情報については、お問い合わせください。

UNLOADER ONE® サイズおよび製品番号

Unloader One® ショート Smart Dosing 付


サイズ	カフ周径*	左内側ヒンジ	右内側ヒンジ	左外側ヒンジ	右外側ヒンジ
XS	25-31 cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31-36 cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	36-43 cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	43-51 cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51-61 cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

*カフ周径: 膝蓋骨中心から15cm下の周径

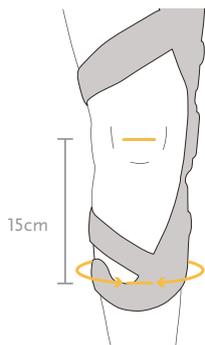

継手は患部側に配置します。

内側ヒンジ 外側ヒンジ

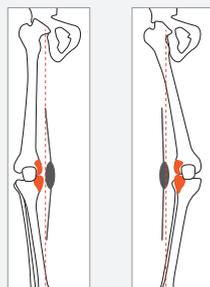

内反膝
○脚

外反膝
×脚



アクセサリ

内張り

センシル		下腿用		大腿用	
サイズ	カラー	右内側/左外側	右外側/左内側	右内側/左外側	右外側/左内側
XS	黒	UNL025111	UNL026111	UNL025121	UNL026121
S	黒	UNL025112	UNL026112	UNL025122	UNL026122
M	黒	UNL025113	UNL026113	UNL025123	UNL026123
L	黒	UNL025114	UNL026114	UNL025124	UNL026124
XL	黒	UNL025115	UNL026115	UNL025125	UNL026125

ジャージ		下腿用		大腿用	
サイズ	カラー	右内側/左外側	右外側/左内側	右内側/左外側	右外側/左内側
XS	黒	UNL015111	UNL016111	UNL015121	UNL016121
S	黒	UNL015112	UNL016112	UNL015122	UNL016122
M	黒	UNL015113	UNL016113	UNL015123	UNL016123
L	黒	UNL015114	UNL016114	UNL015124	UNL016124
XL	黒	UNL015115	UNL016115	UNL015125	UNL016125

ストラップ

ストラップセット	B-701240011	DFSストラップ×2
ストラップセット 右内側・左外側	UNL075107	DFSストラップ×2、ストラップ×2、膝窩パッド（スタンダード）×1、膝窩パッド（ショート）×1、バックル（大腿）×1、バックル（下腿）×1、アリゲータータブ×4
ストラップセット 左内側・右外側	UNL076107	DFSストラップ×2、ストラップ×2、膝窩パッド（スタンダード）×1、膝窩パッド（ショート）×1、バックル（大腿）×1、バックル（下腿）×1、アリゲータータブ×4

バックル

大腿用・下腿用バックルセット 右内側・左外側	B-708217001
大腿用・下腿用バックルセット 左内側・右内側	B-708218001



WWW.OSSUR.JP

Össur Japan G.K.
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-27-7
FORECAST亀戸8階

TEL 03 5609 7797
FAX 03 6745 9528
info_japan@ossur.com

