



Product Catalogue 2019

四半世紀にわたり
使い続けられている
オルトップ



ホワイト



ブラック



適応 ○脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足
○腓骨神経麻痺

サイズ		S		M		L		LL	
足長		20.5~22cm		22.5~24cm		24.5~26cm		26.5~27.5cm	
右 左		右	左	右	左	右	左	右	左
品番	(ホワイト)	69506002	69506001	69506004	69506003	69506006	69506005	69506008	69506007
	(ブラック)	69506102	69506101	69506104	69506103	69506106	69506105	69506108	69506107

交換用パーツ

サイズ		S		M		L		LL	
足長		20.5~22cm		22.5~24cm		24.5~26cm		26.5~27.5cm	
右 左		右	左	右	左	右	左	右	左
品番	(リングストラップ)	69506202	69506201	69506204	69506203	69506206	69506205	69506208	69506207
	(リングストラップ黒)	69506232	69506231	69506234	69506233	69506236	69506235	69506238	69506237
	(ベルクロ® 白)	3540							
	(ベルクロ® 黒)	69060410							

※上記製品につきましては、医師の処方に基づき資格を有した義肢装具士により適合納品されます。

オルトップ® AFO LH

ORTOP AFO
LH Long & Hard

オルトップ®AFOの制動力を
大幅にアップさせました！



ブラック



適応 ○脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足
○腓骨神経麻痺

サイズ		S		M		L		LL	
足長		22~23.5cm		23.5~25.5cm		25.5~27.5cm		27.5~29cm	
右・左		右	左	右	左	右	左	右	左
品番	ホワイト	69506112	69506111	69506114	69506113	69506116	69506115	69506118	69506117
	ブラック	69506120	69506119	69506122	69506121	69506124	69506123	69506126	69506125

交換用パーツ：リングストラップ

サイズ		S		M		L		LL	
右・左		右	左	右	左	右	左	右	左
品番	ホワイト	69506242	69506241	69506244	69506243	69506246	69506245	69506248	69506247
	ブラック	69506250	69506249	69506252	69506251	69506254	69506253	69506256	69506255

交換用パーツ：専用ベルクロ®

品番	ホワイト	3540
	ブラック	69060410

オルトップ® AFO LHプラス

ORTOP AFO
LHプラス
Long & Hard PAT.

側壁ありタイプ

「オルトップ®AFO LHプラス」は、
背屈補助力を大幅にアップさせました。
背屈運動を可能な限り制限しない
足関節装具です。

適応 ○脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足 軽度~中等度
(軽い痙性・足変形を除く)
○腓骨神経麻痺

側壁なしタイプ



サイズ		S		M		L		LL	
足長		22~23.5cm		23.5~25.5cm		25.5~27.5cm		27.5~29cm	
右・左		右	左	右	左	右	左	右	左
品番	側壁あり	3964	3965	3966	3967	3968	3969	3970	3971
	側壁なし	9034	9035	9036	9037	9038	9039	9040	9041

■交換用パーツ リングストラップ／(S・M用)品番 3973、(L・LL用)品番 3972
専用ベルクロ®／(全サイズ適応)品番 3974

※上記製品につきましては、医師の処方に基づき資格を有した義肢装具士により適合納品されます。

GAITSOLUTION Design

ゲイトソリューションデザイン



スタンダードのみ

カラーバリエーション

スタンダード



	左・右	左	右
品番	組立済み	69500001	69500002
	組立キット	69500101	69500102

アーバン



	左・右	左	右
品番	組立済み	69500003	69500004
	組立キット	69500103	69500104


スポーツ



	左・右	左	右
品番	組立済み	69500005	69500006
	組立キット	69500105	69500106

レンタル料：3ヶ月¥14,000（税抜）
レンタルはスタンダードのみです。
医療機関向けレンタルサービスです。

スペック

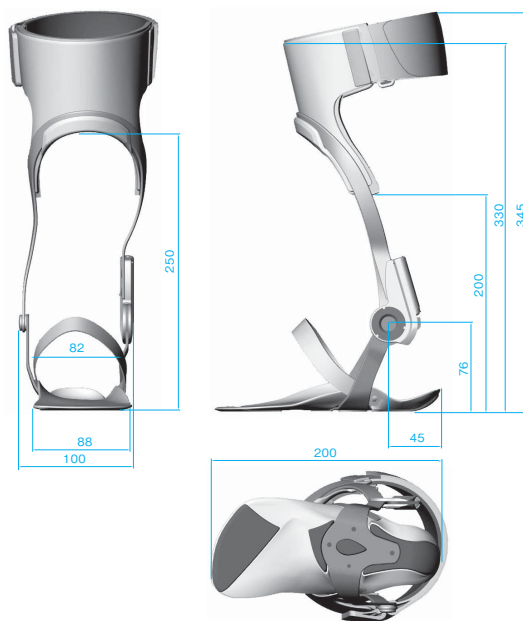

〈Mサイズスペック〉

ゲイトソリューションデザインについて

ゲイトソリューションデザインは個々のお客さま毎に、医師の処方に基づき、義肢装具士が個別に装具として完成させます。
ゲイトソリューションデザインのお求めについては医師又は義肢装具士にご相談ください。

●完成用部品価格



油圧ユニット

¥66,000

（足継手 B制御式・補助付・1方向・川村義肢6950021-SIZE）



あぶみ

¥15,900

（あぶみ C歩行あぶみ・川村義肢6950022-SIZE）



ゲイトソリューションデザインのレンタルサービスも行っております。パッとレンタルご案内サイト→www.p-supply.co.jp/products/patrental/

GAITSOLUTION Design R1

ゲイトソリューションデザイン R1



スタンダード

ゲイトソリューションデザインに強度アップタイプがラインアップ。

体重制限が90kgの仕様が新たにラインアップされました。

フレームにはチタンの2倍以上の強度を持つステンレスを使用し、強度アップをはかることで体重90kgまでのお客さまにお使いいただけます。

カラーバリエーション



●スタンダード

サイズ		S		M		L	
左・右		左	右	左	右	左	右
品番	組立済み	69500031	69500032	69500051	69500052	69500041	69500042
	組立キット	69500501	69500502	69500053	69500054	69500507	69500508

レンタル料：3ヶ月¥14,000（税抜）

レンタルはスタンダードのみです。

医療機関向けレンタルサービスです。



●アーバン

サイズ		S		M		L	
左・右		左	右	左	右	左	右
品番	組立済み	69500033	69500034	69500037	69500038	69500043	69500044
	組立キット	69500503	69500504	69500055	69500056	69500509	69500510



●スポーツ

サイズ		S		M		L	
左・右		左	右	左	右	左	右
品番	組立済み	69500035	69500036	69500039	69500040	69500045	69500046
	組立キット	69500505	69500506	69500057	69500058	69500511	69500512

スペック

機能

- ・制動範囲：中立位から底屈方向に15度
背屈方向の動きに対しては制動無し
- ・制動力調整範囲：2Nm～20Nmまで無段階調整
- ・初期角度範囲：パーツ交換により0度、底屈5度の2種選択可能
- ・重さ：370g（GSD） 480g（GSD-R1 Mサイズ）

適応サイズ目安

サイズ	S	M	L
身長	145～155cm	155～170cm	170～185cm
足長 ^{※1}	210～230mm	230～260mm	260～280mm

下腿部ベルト及び足部ベルトは適切な長さに切ることができる特殊なベルトを使用しております。

※過度の変形がある場合、もしくは本寸法以外の場合は、ゲイトソリューション プラスチックタイプ、もしくは金属支柱タイプ（6ページ）を使用しオーダーで製作してください。

適応

- ・片麻痺、腓骨神経麻痺 等
- ・制限体重：70kg（GSD） 90kg（GSD-R1）

禁忌条件

- ・著明な痙性や変形に対して装具による矯正力を必要とする場合
- ・著明な感覚障がいがある
- ・過度の反張膝がある

※装具の選定は、技術資料をごらんの上、医師の指示のもとセラピストもしくは義肢装具士が行ってください。

※本製品は、国際医療福祉大学教授 山本澄子先生のご指導のもと、川村義肢株式会社が開発を担当した商品です。（特許第4156909号）

ゲイトソリューションデザイン R1について

ゲイトソリューションデザイン R1は個々のお客さま毎に、医師の処方に基づき、義肢装具士が個別に装具として完成させます。

ゲイトソリューションデザイン R1のお求めについては医師又は義肢装具士にご相談ください。

●完成用部品価格



油圧ユニット

¥66,000

（足継手 B制御式・補助付・1方向・パシフィックサプライ6950023-SIZE）



あぶみ

¥15,900

（あぶみ C歩行あぶみ・パシフィックサプライ6950024-SIZE）



レンタルサービスも行っております。パッとレンタルご案内サイト→www.p-supply.co.jp/products/patrental/



ゲイトソリューション

歩行分析に基づいた最高のリハビリテーション 歩くことを最優先に考えた装具です

人間の歩き方を客観的な評価をふまえて分析する「歩行分析」。
ゲイトソリューションは100名以上の片麻痺者の歩行分析の結果に
基づいて開発されました。
この装具は歩行中の下肢の動きをコントロールして、より自然に
歩くことを目的に誕生した新しい概念の装具です。



デモ機
あり

プラスチック装具製作例

左・右	左	右
プラスチックタイプ パーツ式	9789	9788



金属支柱付装具製作例

サイズ	S	M	L
金属支柱タイプ パーツ式	0934	0942	0943

機能

- 油圧調整範囲：抵抗がない状態から半固定まで無段階に調整可能
- 底屈制動範囲：初期角度から底屈方向に18度
- 初期設定角度：パーツ交換により0度と5度の2種類選択可能

適応症例

- 足関節底屈および内反筋群の痙性が軽度から中等度。
- 著しい足部の変形や拘縮がない。
- 立脚相の著しい膝折れや反張膝がない。
- 制限体重：70kg（プラスチックタイプ、金属支柱タイプとも）

ゲイトソリューションについて

ゲイトソリューションは個々のお客さま毎に、医師の処方に基づき、義肢装具士が個別に装具として完成させます。
ゲイトソリューションのお求めについては医師又は義肢装具士にご相談ください。

●完成用部品価格



①プラスチックタイプ

¥46,200（足継手 B制御式・1 一方向・川村義肢978-L/R）

②金属支柱タイプ

¥48,800（足継手 B制御式・1 一方向・川村義肢09-SIZE）

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

オルトップ® ウェッジR

- 7mm・10mmのラテラルウェッジが患部への負荷を軽減します。
- 劣化しにくく、人体への影響が少ないシリコンを使用しています。
- 薄くて伸縮性があるので、重ねて靴下を履いても目立ちません。
- ホルダーは抗菌防臭加工をしています(つま先かかと内ポケット部分)
- 「ウェッジのみ」「ホルダーのみ」の販売もしています。

ORTOP®
ウェッジR



仕 様	主材料	色
ウェッジ本体	シリコン	ブルー
ホルダー	綿100%	グレー・ベージュ
	ナイロン100%(フチ縫い)	

7mm(ホルダー:グレー)

サイズ	S		M		L	
足長	22.0 ~ 24.0cm		24.0 ~ 26.0cm		26.0 ~ 28.0cm	
右/左	右	左	右	左	右	左
品番	69050001	69050002	69050003	69050004	69050005	69050006

7mm(ホルダー:ベージュ)

サイズ	S		M		L	
足長	22.0 ~ 24.0cm		24.0 ~ 26.0cm		26.0 ~ 28.0cm	
右/左	右	左	右	左	右	左
品番	69050030	69050031	69050032	69050033	69050034	69050035

10mm(ホルダー:グレー)

サイズ	S		M		L	
足長	22.0 ~ 24.0cm		24.0 ~ 26.0cm		26.0 ~ 28.0cm	
右/左	右	左	右	左	右	左
品番	69050101	69050102	69050103	69050104	69050105	69050106

10mm(ホルダー:ベージュ)


サイズ	S		M		L	
足長	22.0 ~ 24.0cm		24.0 ~ 26.0cm		26.0 ~ 28.0cm	
右/左	右	左	右	左	右	左
品番	69050111	69050112	69050113	69050114	69050115	69050116

サイズ	S		M		L	
右/左	右	左	右	左	右	左
品番	7mm	69050007	69050008	69050009	69050010	69050011
	10mm	69050117	69050118	69050119	69050120	69050121


品番	サイズ	S	M	L
	色: グレー	69050013	69050014	69050015
	色: ベージュ	69050123	69050124	69050125

※ウェッジ部分は履き間違えないように「ひだり」「みぎ」と左右をひらがなで表記しています。

ホルダーへの シリコン本体 挿入手順

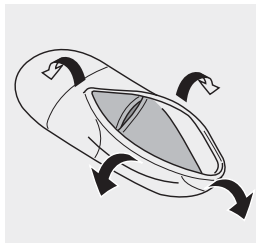


①ポケットの踵部分を裏返しにする。

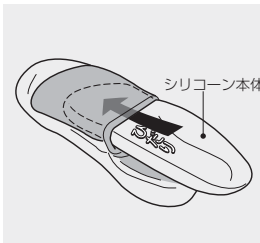

②シリコン本体を踵側から足先に向かって差し込む。



③踵側のポケットを元にもどす。

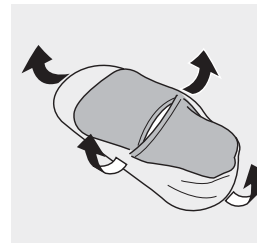

④ホルダーを元に戻す。

足底装具 装着手順



①靴下を履くように足先をいれてください。



②踵部を引っかけるように履いてください。



③シリコン本体がずれていないか確認してください。

※上記製品につきましては、医師の処方にに基づき資格を有した義肢装具士により適合納品されます。

肩鎖関節固定帯



多くのデータに基づき、改良を重ねて現在の形になりました。

- 警察病院型肩鎖関節脱臼固定装具は、大阪警察病院整形外科のご指導のもとに開発され、特に警察官の柔道練習中に起きる肩鎖関節脱臼、及び、亜脱臼の治療に役立っています。
- 固定の確実さを最大の目標とし、多くの臨床データに基づき改良を重ね、現在のような形状となりました。(左・右をご指示ください)

適応 ○脱臼および亜脱臼整復後の治療に使用

サイズ	S		M		L		XL	
胸囲	70～80cm		80～90cm		90～110cm		110～130cm	
右・左	右	左	右	左	右	左	右	左
品番	3359	3358	3357	3356	3353	3352	3355	3354

フレームコルセット



適合性・調整・使用環境を考えた新しい胸腰仙椎装具です。

- 内張りを取り外しができ、洗濯頂く事で簡単にお手入れが可能です。
- ご使用者さまに合わせて、ヒートガンを使ったプラスチック製支持部の調整や、ネジ式による高さの調節が可能になりました。

組立キット

サイズ	男性用Sサイズ*	男性用Mサイズ*	男性用Lサイズ*	女性用Sサイズ*	女性用Mサイズ*	女性用Lサイズ*
品番	94050111	94050112	94050113	94050211	94050212	94050213

適応 ○圧迫骨折 等

サイズ	男性			女性		
	S	M	L	S	M	L
W周径	66～75	75～85	85～95	66～75	75～85	85～95
B周径	78～88	81～95	90～100	76～86	83～93	92～102
前上高さ(MAX)	26	30	35.5	25.5	26	30
前上高さ(MIN)	21.5	23	26.5	21	21.5	22.5
高さ調節幅	4.5	7	9	4.5	4.5	7.5

オーダーダーメンコルセット



むれない素材とシンプルなデザイン!使用感も好評です。

- 弊社開発のCAD/CAMシステムを使い、補装具製作所さまの計測寸法を基にオーダーコルセットを制作します。
- 支柱の板ばねにはステンレス綱を使用しています。
- 支柱の板ばねはオリジナルの手法を用いてカシメずに縫っています。
- 本体材料はユニカワメッシュ、前後当て皮はナイロンメッシュを使用している為、ムレが少なく通気性に優れ、べたつき感が少なくなりました。

適応 ○急性腰痛症 ○変形性脊椎症 ○腰部椎間板ヘルニア ○根性坐骨神経痛など

カラー	ホワイト	ベージュ
-----	------	------

※上記製品につきましては、医師の処方に基づき資格を有した義肢装具士により適合納品されます。

オルトップ® フィンガー

ORTOP
FINGER



新形状楕円形コイルを採用、装着が容易になりました


- カフの芯材を真鍮にすることにより、微妙な調節が可能になり適合性の向上が見込めます。
- カフにポリウレタンコーティングを施している為「撥水性」に優れています。
- カフ部連結にはSUS304鋼材（バネ材）を使用。優れた耐食性がある為、水場での使用も可能です。
- 新形状コイル導入。コイルを楕円形にする事により、バネの特性を損なわずベルトも簡単にコイルに通すことが可能になりました。
またベルトがロスなく締め付けれるため、矯正力も従来品より向上しています。
- 初期角度10度を伸展方向につけており、初期設定時に調整しやすいよう工夫しております。

ベルト ○ベルト本体に縫製加工を施さず高周波ウェルダにて溶着しました。
○ベルトをどこでも裁断する事ができ、長さ調整が容易に行う事が可能です。

パッド ○ポリエチレン発砲体で、素材に撥水性があり、水場での使用も可能です。
○100℃程加熱すれば成形することも可能です。
支持面にあわせて形状変更が容易に行えます。

適 応 ○槌指変形など。

サイズ	A寸法	B寸法	C寸法
SS	20mm	34mm	8mm
S	22mm	36mm	9mm
M	25mm	38mm	10mm
L	27mm	43mm	10mm
LL	29.4mm	51mm	12mm

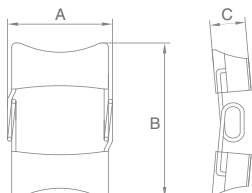

サイズ	SS	S	M	L	LL
品番	69020202	69020302	69020402	69020502	69020602

交換用パーツ：ベルト

サイズ	SS	S	M	L	LL
品番	-	69020603	69020604	69020605	69020606

オルトップ® シグマリスト サポート



ORTOP® シグマリスト サポート

TFCC損傷・尺骨突き上げ 症候群用のサポーター

尺背側アルミステーによる背屈・尺屈制限が目的。
特に痛みがでる尺屈の制限が可能なサポーターです。

サイズ	適応範囲（手首周径）
S	12.5～14.5
M	14.5～16.5
L	16.5～19.0

サイズ	S	M	L
品番	右 27011002 左 27011001	27011004 27011003	27011006 27011005

※上記製品につきましては、医師の処方に基づき資格を有した義肢装具士により適合納品されます。

アルファ オルトα こみち

こみち



フォーマルタイプ

オルトα



フォーマルタイプ



ブラック ブラウン



布タイプ

ワイン

フォーマルタイプ

- 布タイプオルトα・こみちの特徴はそのままに甲材に合成皮革を使用しました。
- つまみやすい形状のベルトで着脱が容易です。

リーチャーを使用される方はループ付ベルト（オプション）に交換してください。

	こみち	オルトα
品番	47350417～	47350401～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ)	21.0～28.0cm(1cmきざみ)
重量	200g(23cm片足)	226g(23cm片足)
色	黒	黒
材質	表素材：合成皮革、裏素材：豚革(踵部)・ポリエステル100%(その他の箇所) 底 材：合成底	

¥8,400(税抜)(両足)

¥10,400(税抜)(両足)

¥4,200(税抜)(片足)

¥5,200(税抜)(片足)

※「オルトα」につきましては、補装具製作所、装具の適合確認が可能な福祉用具販売店にて適合納品されます。

布タイプ

	こみち	オルトα
品番	47351101～	47351001～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ)(ワインは22.0～24.0cm)	21.0～28.0cm(1cmきざみ)(ワインは22.0～25.0cm)
重量	180g(23cm片足)	195g(23cm片足)
色	ブラック・ブラウン・ワイン	ブラック・ブラウン・ワイン
材質	表素材：ポリエステル撥水加工、裏素材：ポリエステル、底材：合成底	

¥7,800(税抜)(両足)

¥4,500(税抜)(片足)

¥3,900(税抜)(片足)

交換用パーツ

- こみち交換用カップインソール ¥450(税抜)(片足)
- 布タイプの各サイズベルト・延長ベルト ¥400(税抜)(1本)
- フォーマルタイプの各サイズベルト・延長ベルト ¥950(税抜)(1本)

Vela

Vela
New Style Shoehorn

新しいスタイルの靴べら

- 履きたい靴を履く楽しさ、新感覚で使える靴べらです。



ブラック

グリーン

ピンク


靴のかかとを挟み込むクリップ

靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するため、靴べらを手で支える必要がありません。



差し込みやすいクリップ形状

クリップの先端が広がっていますので靴のかかとり取り付けやすくなっています。

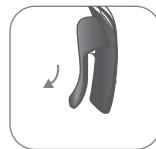

かかとを靴に誘い込むカーブ

靴に足を入れる自然なカーブに靴べらが曲がっていますので、足への負担が少なく靴を履くことができます。



ポリカーボネート使用

本体には強度の高いポリカーボネートを採用しています。

品番	29415001	29415002	29415003
色	ブラック	グリーン	ピンク

¥1,000(税抜)



MAIGOROMO

日本人女性の足に
ジャストフィットする靴



シュリンク



エナメル

重量	248g	258g
サイズ23cm (片足)		
材質／表素材	天然皮革・人工皮革	天然皮革

¥18,500 (税抜)

交換用靴ヒモ (2本入)

品番

48051022

サイズ	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
シュリンクタイプ	48051010	48051011	48051012	48051013	48051014	48051015	48051016	48051017	48051018
エナメルタイプ	48051001	48051002	48051003	48051004	48051005	48051006	48051007	48051008	48051009

ゲイトフィックス

Gait fix



ゲイトソリューションデザインを室内でも安全にご使用頂くために
最も適したルームシューズを開発しました。

●仕様

品番	サイズ	適応足長(参考)	カラー	価格(税抜)
69490001	S	21~23cm	ブラック	¥5,445
69490002	M	23~26cm		
69490003	L	26~28cm		




オルトップ® コンフォート ケイン

一本つえ

品 番	38110101	38110102	38110103	38110104	38110105	38110106
色	すみ	かきしぶ	ぶじ	わかたけ	きんかん	もみじ
素 材	ヘッド:アクリル/ネック部:ポリカーボネイト/シャフト:アルミ					
高さ調整幅	712~937mm(注)					
重 量	250g(先ゴム・ストラップ込)					
製造国	日本					
	¥6,200	¥7,800	¥7,800	¥7,800	¥7,800	¥7,800
	(税抜)					


※品番38110102/38110103/38110104/38110105/38110106はグラデーションタイプです。
注)カットは22.5cm以上行わないでください。パイプ径が先ゴムの適合範囲から外れ、先ゴムが破損する恐れがあります。

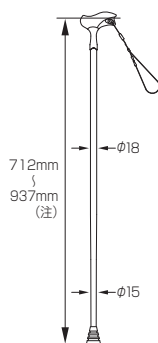

マーク
取得

伸縮式つえ

品 番	38110201	38110202	38110203
色	みずかがみ	くり	やまぶき
素 材	ヘッド:アクリル/ネック部:ポリカーボネイト/シャフト:アルミ		
高さ調整幅	712~937mm(25mm幅で10段階)		
重 量	265g(先ゴム・ストラップ込)		
製造国	日本		
	¥8,800 (税抜)		

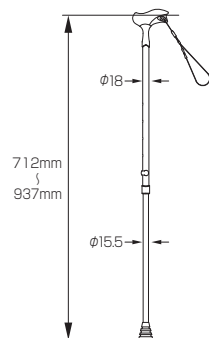


マーク
取得

交換用パーツ



コンフォートケイン 先ゴム

品 番	38110304
素 材	EPT合成ゴム
適応支柱径	15~15.5mm
重 量	26g
	¥600 (税抜)

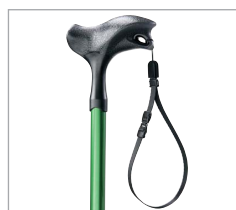

コンフォートケイン ストラップ

品 番	38110302
素 材	紐:ナイロン
	¥1,000 (税抜)

k パシフィックサプライ株式会社

●大東本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

- 札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

販売店名

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。