



ENJOY-LIFE

 **MEYRA®**
We move people

ENJOY-STYLE





WIR BEWEGEN MENSCHEN WE MOVE PEOPLE

< MOTIVATION >

MEYRA is one of the world's best known and most successful manufacturers of wheelchairs and suppliers of rehabilitation aids. The phrase "We move people" is more than just a claim, it's our philosophy and it determines how we do business. We support and motivate disabled people and allow them to be mobile and independent.

MEYRA社は車椅子やリハビリ機器のサプライヤーとして、世界で最もよく知られ、最も成功したメーカーの一つです。「私たちは人々を動かします」という言葉は、ただ主張するだけの言葉ではなく、私たちの哲学でありどのようにビジネスを行うかを決定します。私たちは、障害のある方に移動手段を提供することによって、サポートし、動機付けし、自立（自律）することを可能にしています。

< Introduction >

創始者であるヴィルヘルムマイヤー氏が述べた、“障害のある方は、高価値と個別性によってもたらされる、
一体的で自立した生活を必要としている”という言葉は、企業グループの理念であり続けています。

歴史

- 1936年 会社設立
- 1938年 障害者のための乗り物を初めて製作
- 1982年 社屋をカルドフに移転
- 1992年 MEYRA社とORTOPEDIA社が合併
- 2006年 社名をMEYRA-ORTOPEDIAに変更
- 2013年 Medort社の傘下に入る
- 2018年 MEYRAグループ設立





MEYRA耐久試験

MEYRA社は、法的基準の基準値を超えてテストします。当社の品質管理システムは、DIN EN ISO 13485:2012 (2018年時点) に従って認証されています。基準の要件は毎年見直され、テストレポートによって確認されます。さらに、ストレスおよび信頼性試験は、法定基準よりも高い負荷で実行されます。これはユニークで、私たちの車いすの高品質基準への適合を保証します。



ブリックス

発達に合わせて、幼児期から使用できる車椅子

- 子どもと親の視点から作られた、軽量(約9kg)で取り回しに優れた車椅子です。
- 子どもの弱い力を逃がさずに車輪に伝えることができるので、ほんの少しの力でも操作できます。
- カラフルなデザイン、フレームワークに加え、多様な調節が可能です。



FLASH (フラッシュ)

ドイツの高い品質とシンプルなデザインを兼ね備えた車椅子

- 子どもの存在価値を高めてくれる車椅子です。
- 従来ある製品よりも安全で簡単に調整することができます。
- 子ども用では小さくて、大人用では大きくて、とお困りの方に、ジャストサイズでお乗りいただくことが可能です。



マイチェア Basic (ベーシック)

自分らしい人生を送るために、自分で自由に選択ができる車椅子です

- フレームカラーはもちろん、細かな仕様までご自分で決めることができます。
- 車椅子でアクティブに動きたいという方にも、車椅子でリラックスしたいという方にも様々なオプションがあなたの要望に応じてくれるでしょう。



SMARTf (スマートエフ) **NEW**

最高のドライビング特性が備わっており、
日常使いにピッタリ且つ信頼性がある1台がやってきました！

- SMARTfは軽量で完璧なハンドリングを革新的なデザインで実現しました。
モダンな折りたたみ式アクティブアダプティブ車椅子ではありますが、絶対的なダイナミックさと安定感をもたらしています。





※一部仕様変更されています



世界最小クラスの車椅子であるブリックスは、低年齢のお子さまの
小さな力でもその能力を最大限に発揮させることのできる、
最上級のモデルです



※一部仕様変更されています

ブリックス



ジャストフィット

豊富なサイズ

座幅と奥行きは18cmから選べます
お子さまの体格に合わせてより座りやすく

成長への対応

身長への伸びには調整で簡単に
体格の向上には部品の交換で
それぞれ対応します

こぎやすさ

リジッドフレーム

あえて折りたたまないことで剛性を高め
こいだ時の力が効率よく推進力に変わります

キャンバー角

最大11度の「ハの字」が小回りを行いやすくします
ハンドリムが身体の近くに来ることもなり
こぎやすさがさらにアップ!



フレームワーク

シンプルでありながらも存在感のある
デザインのブリックス
収納の時など小さくしたい場合は大車輪を
簡単に付け外しできます
乗り降りの際にフットサポートに体重を
かけても車椅子が前に倒れない構造です



フレームサイズ	ミニ	ミディ
	¥344,900～(非課税)	¥344,900～(非課税)
フットサポート	¥24,600(税抜)※	
サイドガード	¥19,000(税抜)※	
タイヤ	20インチ	22インチ
座奥行き(2cm間隔)	18～28	22～32
座幅(2cm間隔)	18～36	
バックサポート高(2cm間隔)	20～34	
手押しハンドル	標準/ショート	
前輪キャスタ	4インチ/5インチ/6インチ(ノーパンク)	
ハンドリム	アルミ	
ハンドリム距離	15mm/25mm	
キャンバー角	6度/11度	
フレームカラー	クロスレッド/クロスイエロー/クロスオレンジ/マットブラック シルバーメタリック/グリーンメタリック/オレンジメタリック	
シートカラー	レッド/ブラック/イエロー/オレンジ	

標準装備

- 張り調整式バックサポート
- 背座間角度調節機構(84.87.90.93.96.99度)
- 大車輪脱着機構
- フットサポート前後、角度調節機構
- 座奥行き調節機構(スライド式)
- 回転収納式(高さ角度可変)手押しハンドル
- バックサポート位置(車軸位置)調節機構
- 転倒防止バー(右側のみ)。両側を希望される場合は、オプションの転倒防止バーが必要です。

※本体と同時購入時は非課税となります。

●別売オプション (課税: 表示は税抜価格です) (本体と同時に購入時は非課税となります)

①ぜひご検討を



転倒防止バー
回転収納式(左)

¥23,000




シートクッション
赤、黒、黄、橙

¥22,600



スポークカバー 透明
22インチ用のみ

¥29,600

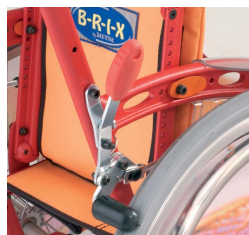

手押しブレーキ介助者共用型
高さ調整式手押しハンドル併用不可

¥20,600



高さ調整式手押しハンドル
手押しブレーキ介助者共用型併用不可

¥41,900



シリコン製ハンドリムカバー
黒

¥20,600



4点式シートベルト
サイズXS、S

¥16,900

②必要に応じてお好みで



マックスグリップハンドリム
22インチ用のみ

¥115,600



軽量ホイール
片側 330g減

¥100,000



キャスト アルミホイール
4.5インチ/シルバー

¥54,200



ライトニングキャスト
4インチのみ

¥24,300



反射板
4枚入り

¥3,200



シート調整レール
座奥行26cmまで

¥17,500

●組み合わせ例

※一部仕様変更されています



シートカラー レッド

フレームカラー クロスイエロー

フレームミニ ¥344,900

フットサポート ¥24,600

サイドガード ¥19,000

転倒防止バー ¥23,000

合計 ¥411,500



Color variation カラーバリエーション

※一部仕様変更されています

フレームカラー

マットブラック

シルバーメタリック

グリーンメタリック

オレンジメタリック

シートカラー
レッド



シートカラー
ブラック



シートカラー
イエロー



シートカラー
オレンジ



※印刷の都合上、実際の色合いと多少異なる場合がございます。



Color variation カラーバリエーション

※一部仕様変更されています

クロスレッド

フレームカラー
クロスイエロー

クロスオレンジ

シートカラー
レッド



シートカラー
ブラック



シートカラー
イエロー



シートカラー
オレンジ




※印刷の都合上、実際の色合いと多少異なる場合がございます。

ブリックスをお使いいただいているお客さまのお声

ギッズカーニバルで「これだ!!」と一目惚れしたんです。「まだ早い」って言う人もいたけれど、ブリックスに乗せてみるとむしろ遅いぐらいに感じました。今では、買い物に行くときに行きたい所に自分で行って、追いかけるのが大変。そして連れて帰るのも一苦勞。

抱っこやベビーカーと違ってお友だちと同じ目線で遊べるようになったんだ！それに親子3人で手をつないで歩けるようになったの。とっても嬉しい！今は、「あそこに行きたい」「ここにいたい」と言ってはお母さんを困らせてるけど、自分の気持ちを伝えてイイんだって思えて、楽しいよ！

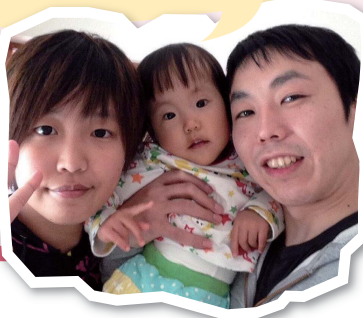

家族でお出かけリクエストはアンパンマンミュージアム、水族館、動物園…。たくさんお出かけして、ブリックスを自慢したいね。

まだ一人で遠くにはいけないけど、これからいっぱい練習してたくさん動けるようになって欲しいし、目指せかけっこ！等賞!!

ぼくが、この車椅子を一番気に入っているところは、とっても「がんじょう」なところ。思いっきり動き回っても、全然こわれないうんざ！それに、色がカワイイから、みんな見てくれるし、この車椅子を見たら「ぼくだ!!」ってすぐにわかってくれるんだ。誰よりも速く移動出来るから、みんなからは「隊長」って呼ばれてるんだよ！

ママは、ぼくが一人で走り回ることを止めないし、怒らないんだ。ぼくだって、自分の好きなところに自由に行きたいし、それをジャマされたくないもん。せっかく自由に動き回れる車椅子があるのに、どうして周りの人は冒険しちゃダメって言うの？走ったり転んだりしたってへっちゃんだ。ママは、ぼくの将来のことを考えて、ぼくがひとりでも自由に動き回れるカッコイイ車椅子をいっしょに選んだんだよ。だから、ぼくは今とっても幸せ！



『姉弟で元気にイベントに参加していただきました。お姉さんはブリックスユーザーとしてもう2年です。こんなメッセージをいただきました！』

小学校で毎日ブリックスで教室を移動しています！軽くて漕ぎやすいから、みんなと同じスピードで移動♪
疲れた時はクラスの友だちに押してもらって、毎日大活躍です！もっと早く漕げるようになって、運動会のかけっこ一番になりたいなあ〜



ドイツの高い品質とシンプルなデザインを兼ね備えた車椅子です

子ども用では小さくて、大人用では大きくて、とお困りの方に最適な車椅子です





ミディフレーム

ジャストフィット

シート幅

少ない部品の追加で、左右で1cmずつ（合計2cm）の拡幅ができます

シート奥行

従来あるシートパイプだけの延長ではなく、ベースフレームも後方に伸びるので、お子さまの成長に合わせて車椅子も成長し、常にジャストフィットな状態を目指します

こぎやすさ

高剛性フレーム

左右からの折りたたみでありながら、しっかりとした剛性の高いフレームは動きやすさにつながります

- 本体重量：約10kg
- 耐 荷 重：75kg

キャンバー角

0・3・6度から選択でき、小回り重視の設定もできます
車椅子に慣れてきたら、納品後の変更も可能です

フレームワーク

フットプレート

奥行を大きくとることで、足元が安定しやすくなります
乗り降りの時もひろびろと！

キャストオフセット

キャストの位置とレッグサポートパイプが外側にオフセットしていることで、横方向の安定と足元のスペースを大きくとることができるデザインです
股関節を30～40° 外転させて座ることができるので、身体への負担を少なくすることが可能です



マキシフレーム

フレームサイズ	ミディ	マキシ
	¥270,000～（非課税）	¥270,000～（非課税）
フットサポート	¥49,800（税抜）	
サイドガード	¥36,000～（税抜）	
シート幅（2cm間隔）	24～30	32～40
シート奥行き（2cm間隔）	24～30	32～40
バックサポート高（＋2cm）	25／30／35／40	
前座高（1cm間隔）	39～48cm（キャストサイズにより異なります）	
後座高（2cm間隔）	36～44	39～47
タイヤ	22インチ	24インチ
キャスト	4インチ／5インチ（ソリッド）	4インチ／5インチ（ソリッド）、6インチ（ソフトソリッド）
キャンバー角	0度／3度／6度	
フレームカラー	トルネードレッド／レモン／シルバークロム／マットブラック グリーンメタリック／オレンジメタリック／ブルーメタリック	
シートカラー	レッドナイロン／イエローナイロン／オレンジナイロン／ブラックナイロン／ブラックメッシュ	

●別売オプション (課税: 表示は税抜価格です) (本体と同時に購入時は非課税となります)

1 ぜひご検討を



回転収納式転倒防止バー

左右一組

¥34,700



シートクッション

シート色と同色(3cm厚)


¥19,300



スポークカバー

FLASH

¥27,000

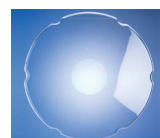

スポークカバー

透明

¥30,000



高さ調整式手押しハンドル

高さ30cmまで

¥34,200



左右連結式手押しハンドル

高さ調整・着脱式

¥48,000



折りたたみブレーキレバー

伸縮

¥6,900



アングルストラップ

左右一組

¥6,800



ヒールループ

左右一組

¥17,800



フットサポートロック機構

¥22,200



ドラムブレーキ

取付条件はお問合せください

¥58,600



セラピーテーブル

透明

¥40,200



シリコン製ハンドリムカバー

ハンドリムは含まない

¥22,200



シートベルト

¥10,000



杖立て

ティッピングバーの選択要

¥6,500



ティッピングバー

転倒防止バー(両側)との組合せ不可

¥12,000



ヘッドサポート

テンションバー含む

¥78,000


2 必要に応じて
お好みで



軽量ホイール

片側 330g減

¥82,600

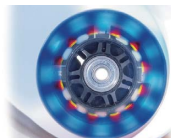

ライトニングキャスタ

4インチのみ

¥20,900



アルミキャスタ

4、5インチ/シルバー

¥46,300



シックススターホイール

高圧タイヤ・アルミハンドリム付24インチのみ

¥148,600



クロスホイール

オフロードタイヤ・ステンハンドリム付24インチのみ

¥103,500



マックスグリップ

リム間15mmのみ対応

¥98,800



テトラハンドリム

ハンドリム付24インチのみ

¥66,000

●組み合わせ例



シートカラー	ブラックナイロン
フレームカラー	レモン
フットサポート	¥270,000
サイドガード	¥49,800
左右連結式手押しハンドル	¥36,000
シートクッション	¥48,000
折りたたみブレーキレバー	¥19,300
アングルストラップ	¥6,900
スポークカバー (FLAH)	¥6,800
転倒防止バー (両側)	¥27,000
	¥34,700
合計	¥498,500



シートカラー	ブラックメッシュ
フレームカラー	ブルーメタリック
フットサポート	¥270,000
サイドガード	¥49,800
アルミキャスタ	¥36,000
シートクッション	¥46,300
軽量ホイール	¥19,300
高さ調整式手押しハンドル	¥82,600
転倒防止バー (両側)	¥34,200
メッシュシート生地	¥82,600
	¥17,000
合計	¥589,900



Color variation カラーバリエーション

※一部仕様変更されています

フレームカラー

トルネードレッド

レモン

シルバークロム

マットブラック

シートカラー
レッド



シートカラー
ブラック



シートカラー
オレンジ



シートカラー
イエロー



※印刷の都合上、実際の色合いと多少異なる場合がございます。



Color variation カラーバリエーション

※一部仕様変更されています

グリーンメタリック

フレームカラー
オレンジメタリック

ブルーメタリック

シートカラー
レッド



シートカラー
ブラック



シートカラー
オレンジ



シートカラー
イエロー



※印刷の都合上、実際の色合いと多少異なる場合がございます。

MEYRA[®]

myCHAIR

by Meyra[®]



本体価格	¥247,500～ (非課税)
シート幅	38/40/43/46/48/50cm (追加¥19,800)
シート奥行	40/43/46cm
前座高	44～56cm (設定により異なります)
後座高	42～52cm (設定により異なります)
バックサポート高	38/40/42/44cm
車軸位置調整	前出し2.5cm/4cm/5.5cm
耐荷重	135kg
本体重量	13kg～ (設定により異なります)
大車輪	24インチ
キャスタ	5/6/7インチ

標準装備

- バックサポート張り調整式
- 標準サイドガード (跳ね上げ・着脱式) + 高さ調整式アームサポート
- スイングアウト・着脱式レッグサポート + 角度調整式フットサポート
- 転倒防止装置 + ティッピングバー (右側)
- クッション
- シートベルト



バックサポート張り調整式

標準装備

—



標準サイドガード

標準装備

—



スイングアウト着脱式レッグサポート

標準装備

—



標準ホイール

標準装備

—



転倒防止装置(右)

標準装備

—



アルミホイールキャスト

—

¥46,300



アルミサイドガード

フレームカラー同色

¥44,500



アルミサイドガード

マットブラック

¥42,500



アームサポート付高さ調整式アルミサイドガード

フレームカラー同色


¥80,200



角度可変式・膝パッド付レッグサポート

スイングアウト・着脱可

¥39,600

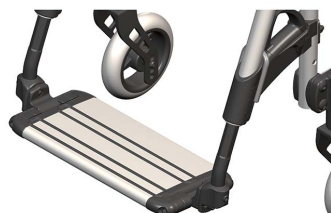

片側跳ね上げフットサポート

前後・高さ・角度調整可

¥62,000



高さ調整式手押しハンドル

17cmまで

¥39,600



カーブレハンドリム

アルミブラック/シルバー

¥56,000



カーブグリップLハンドリム

アルミ+滑り止め

¥70,800



シリコン製ハンドリム

—

¥20,800



アクティブホイール

ラジアルスポーク/強化リム

¥32,600



ブラックライトホイール

マラソン+/アルミハンドリム

¥149,500

※オプションは課税、ただし本体と同時購入の際は非課税となります



マラソンプラスエボリューションタイヤ

—

¥12,900

介助者用ドラムブレーキ

—

¥54,600

ブレーキレバー延長

折りたたみ式

¥6,900

スポークカバー

透明

¥28,000



座シートポケット

—

¥11,300

背シートフラップ

—

¥16,900

カップホルダー

Klickfix製

¥14,500



スティックホルダー

Toolflex製

¥15,600

X-TREMEバックパック

—

¥14,000

杖入れ

—

¥6,000

アクセサリネット

—

¥2,200

デザインが異なる場合もございます

※オプションは課税、ただし本体と同時購入の際は非課税となります

フレームカラー

＜標準色＞

スカイブルー



ポーラーホワイト



マットブラック




＜オプション色＞

オレンジメタリック




レモン

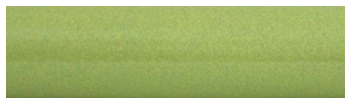

イエロー



ブルーパープルスター

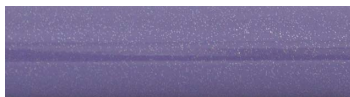


チタングレイ



スペアミント




ピンク

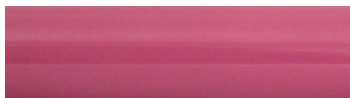

ブルーメタリック




サファイア

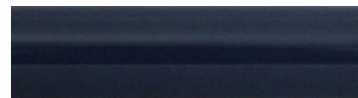


クロスレッド




クロスオレンジ

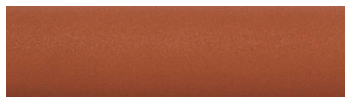


スペシャルゴールド

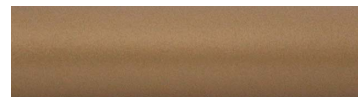

グリーンメタリック

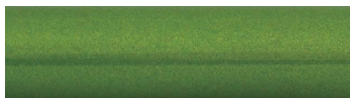

ターコイズグリーン

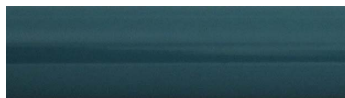

*オプションカラー追加費用

¥21,000



＜キャストフォーク&バリオブロック別色＞

¥11,300-の追加で上記カラーから本体フレームカラーとは別に選択することが可能です

* 画像はイメージです。キャストフォークとバリオブロックは同色となり本体フレームカラーと別に1色のみ選択が可能です。

※オプションは課税、ただし本体と同時購入の際は非課税となります

MEYRA®

SMART^F

ENJOY



間違いなく、
Smartは完璧な相棒です

ダイナミックで実用的
— Smartと一緒に自立できる

走るのがとても楽しい!!

SMART^F



本体価格	¥287,000～ (非課税)
シート幅	32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52cm (座幅50/52cm+¥15,800)
シート奥行	38/40/42/44/46/48/50cm (フレーム奥行による)
前座高	44～53cm (設定により異なります)
後座高	40～53cm (設定により異なります)
バックサポート高	25/30/35/40/45/50cm (2.5cm延長可)
車軸位置調整	前出し4/5/6/7/8/9/10cm
耐荷重	150kg
本体重量	7,4kg (ホイール重量含まず)
大車輪	24/25/26インチ (オプションホイール含む)
キャスタ	4/5/6インチ

標準装備 ●バックサポート張り調整式


*別途、サイドガード (¥21,500～) ・フットサポート (¥33,800～) の選択が必要です。

*クッションは本体価格に含みません。

*画像はオプションホイール、オプションキャスタ装着車です。


キャスタ

ライトニングキャスタ

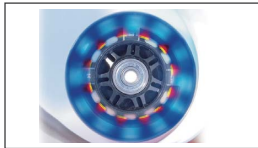

¥20,900
4inのみ

アルミホイール
キャスタシルバー

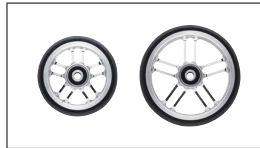

¥46,300
4in/5in

フロッグレッグス
アルミホイールキャスタ




各¥58,300

Size:4in/5in Color:シルバー/ブラック/レッド/オレンジ/ブルー

クッション

シートクッション

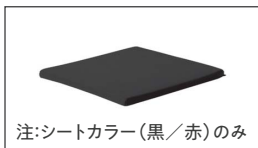

注:シートカラー(黒/赤)のみ

¥15,800

単層3cm厚
シートカラー同色

ホイール

シルバーデザインホイール



¥14,900
ラジアルスポーク/
ラージフランジハブ

アクティブホイール



¥43,200
ラジアルスポーク/
ラージフランジハブ

軽量ホイール



¥43,200
シュワルベワンタイヤ/
アルミブラックハンドリム

NEWアクティブホイール



¥148,600
ラジアルスポーク/ワンタイヤ
ブルー/レッド/イエローゴールド
*タイヤはブラックのみ

シックススターホイール



¥148,600
8bar高圧タイヤ/
アルミハンドリム

クロスホイール



¥148,600
オフロードタイヤ/
ステンレスハンドリム

スピナジーホイール



¥203,200
12スポーク(オレンジ/ホワイト)/
マラソンプラスタイヤ/
ステンレスハンドリム

スピナジーホイール



¥236,800
12スポーク(オレンジ/ホワイト)/
マラソンプラスタイヤ/
テトラハンドリム

ブラックライトホイール



¥148,600
マラソンプラスタイヤ/
アルミハンドリム

アクティブホイール



¥149,600
25in/26in
ラジアルスポーク/ラージフランジ/
マラソンプラスタイヤ/ステンレスハンドリム

テトラクイックリリース



¥28,300

ホイールキャンバー3°



¥4,300

オプション

ハンドリム

チタンハンドリム	テトラハンドリム	シリコンコーティング	ケーブルハンドリム	ケーブルグリップLハンドリム
				
¥43,200 -	¥49,300 -	¥31,000 ハンドリム別	¥84,000 -	¥106,000 コーティング付

ハンドリム

タイヤ


ブレーキ

デュアルハンドリム	シュワルベ マラソンプラスタイヤ	シュワルベワンタイヤ	ライトブレーキ	ドラムブレーキ
				
¥115,300 片手駆動式	¥10,500 24×1"	¥13,800 24×1"	¥17,500 -	¥43,800 -


バックサポート

プッシュハンドルロング	高さ調整グリップ	回転式折りたたみ プッシュハンドル	独立式高さ調整式 プッシュハンドル	背角度調整式
				
¥8,800 -	¥37,600 100mmUP/ブロックなし	¥24,500 -	¥33,200 150mmUP/ブロックあり	¥31,800 +/-15° (5°ピッチ)

サイドガード

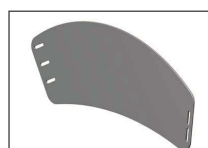アルミサイドガード	高さ調整式アーム付 サイドガード	軽量アルミサイドガード	高さ調整式アームサポート付 サイドガード	カーボンサイドガード	ホイールカバー
					
¥27,000 カーボン内張り	¥40,300 アームパッドショート/ロング	¥21,500	¥53,900 アルミサイドガード/ カーボン内張り	¥79,500 -	¥13,900 50mm幅


フットサポート

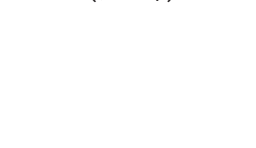軽量アルミフットサポート 開閉補助式	軽量アルミフットサポート	アルミフットサポート	軽量アルミフットサポート (ショート)	フットサポート外折れ
				
¥6,800 フットプレート別	¥34,800 奥行100mm/150mm 片側跳ね上げ/ 高さ角度調整可能	¥33,800 奥行150mm 両側跳ね上げ/ 高さ奥行角度調整可能	¥46,300 奥行150mm 片側跳ね上げ/ 高さ角度調整可能	¥15,500 -

※表示価格は税抜き価格です。本体は非課税。オプションは課税、本体と同時に購入時には非課税となります。

※予告なく仕様変更される場合があります

スポークカバー

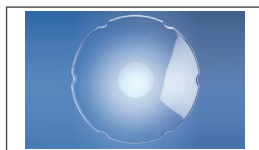

¥22,500
透明

転倒防止装置

回転収納式



¥38,500
両側

回転収納式



¥19,300
左側／右側

ティッピングバー



¥9,000
両側




¥4,600
左側／右側

トランジットホイール



¥33,200
-

シートベルト

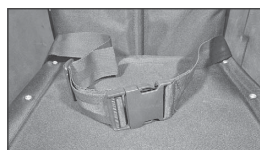

¥7,500
黒

杖立て



¥4,900
-

アクセサリネット



¥1,800
-

バックパック

X-TREMEバックパック



¥7,500
デザインが変わる場合があります

※表示価格は税抜き価格です。本体は非課税。オプションは課税、本体と同時に購入時には非課税となります。

※予告なく仕様変更される場合があります

カラー


フレームカラー



チタングレイ



レモン

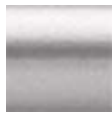

シルバーメタリック



マジックブルー



ブラックスター



イエロー



ディープブラック



マットブラック



ブルーメタリック



レッドメタリック



ブルゴーニュレッド



シグナルホワイト



グリーンメタリック



オレンジメタリック



クロスイエロー



クロスオレンジ

シートカラー

ナイロン (黒)




—

メッシュ (黒)



¥16,600

メッシュ (赤)

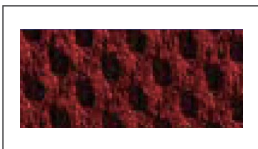

¥16,900

本体価格	¥287,000
アルミサイドガード	¥27,000
軽量アルミフットサポート	¥34,800
フットサポート自動折りたたみ式	¥6,800
シートクッション (3cm厚)	¥15,800
ライトブレーキ	¥17,500
バックサポートメッシュブラック	¥16,600
アルミホイールキャスタ	¥46,300

合計 **¥451,800**



本体価格	¥287,000
アルミホイールキャスタ	¥46,300
シートクッション (3cm厚)	¥15,800
NEWアクティブホイールブルー	¥148,600
ホイールキャンパー3°	¥4,300
ライトブレーキ	¥17,500
アルミサイドガード	¥27,000
軽量アルミフットサポート	¥34,800
バックサポートメッシュブラック	¥16,600
転倒防止バー (両側)	¥38,500

合計 **¥636,400**





パシフィックサプライ株式会社

大 東 本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010

東 京 本 社 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9
TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016

札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805

仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821

東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016

名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697

大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015

広島営業所 TEL.082-535-8300 FAX.082-535-8301

福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

www.p-supply.co.jp

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。