

MURO Solution

MURO ソリューションが、リハビリテーションを革新




MURO Solution

MURO ソリューション




MURO ソリューションが、リハビリテーションを革新

経皮的な電気刺激により筋委縮改善を促し、上肢リハビリテーションを効果的におこなうことができます。

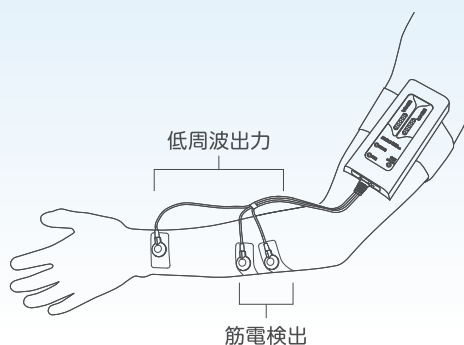

筋電に応じた電気刺激を治療対象筋に与えます。

アーチファクトなどによる誤った刺激出力を防止する機能を装備し、治療中の不快感を低減しました。

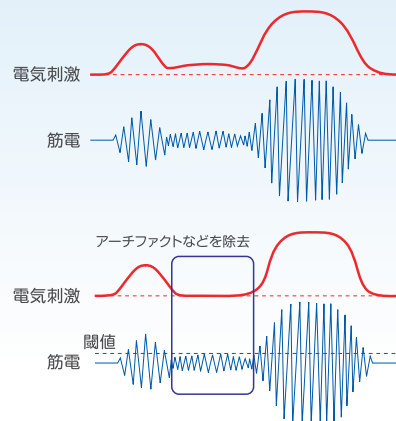

※イメージ図

本体のみで微調整がきます

リストサポーターを使用すれば、治療中に起きる電極の剥がれやズレを防ぐことができ、確実なリハビリテーションがおこなえます。



外部調整ユニットは手のひらサイズで、ポケットに収納可能。しかも、バッテリーレス。落下などによる衝撃に対しても安心なシリコンカバー付き。治療条件設定の際に場所を選びません。



MESU-200

MURO ソリューションは、早稲田大学人間科学学術院 村岡慶裕教授の発明と指導を元に開発した製品です。

Muraoka Y, et.al.:EMG-controlled hand opening system for hemiplegia., Proc. 6th Vienna International Workshop on Functional Electrostimulation: 255-258(1998)

セット内容

● MURO ソリューション 基本セット



〈内容〉 本体
充電用ACアダプター
本体カバー
ディスポ電極／1袋 (20セット)
外部調整ユニット
リストサポーター(左右 各SM)／1セット

● 品番 69600001

希望小売価格*
¥410,400
(税込)

レンタル料*
¥7,560/1ヶ月
(税込)

● MURO ソリューション 本体セット

〈内容〉 本体
充電用ACアダプター
本体カバー
ディスポ電極／1袋 (20セット)

● 品番 69600002

希望小売価格*
¥320,280
(税込)

付属品・オプション

● ディスポ電極

〈内容〉 1袋 (20セット)

● 品番 69600003

希望小売価格*
¥16,524
(税込)

● リストサポーター

サイズ	S		M	
	左	右	左	右
品 番	69600005	69600004	69600007	69600006

希望小売価格*
一具 ¥15,228
(税込)

リストサポーター



本 体



充電用ACアダプター



本体カバー



固定ベルト付き

ディスポ電極



3個/セット×20

外部調整ユニット



※本製品は医療機関のみの販売となります。個人のご使用についてはお近くの医療機関へお訪ねください。

販 売 名	MURO ソリューション
一般的名称	低周波治療器
クラス分類	管理医療機器／特定保守管理医療機器
認 証 番 号	223AKBZX00201000

[本体]

MURO ソリューション本体		
型 番	MESU-100	
電源定格	定 格 電 源	DC 3.7V (内蔵リチウムイオン電池)
	電 源 出 力	1200mAh
性 能	治 療 時 間	15分／連続 (外部調整ユニットを用いて設定した場合)
	パ ル ス 幅	最大1000μsecの繰り返し
	出力周波数	16Hz
	最大出力電圧 (実効値)	1.07V±15% (500Ω負荷時) 4.07V±15% (2.25kΩ負荷時)
	最大出力電流 (実効値)	2.97mA±15% (500Ω負荷時) 2.71mA±15% (2.25kΩ負荷時)
	最大振幅電圧	±6.50V±15% (500Ω負荷時) ±25.8V±15% (2.25kΩ負荷時)
	最大振幅電流	13.00mA±20% (500Ω負荷時) 11.78mA±20% (2.25kΩ負荷時)
	安 全 装 置	過電流保護回路、出力零位置開始保護
外 形	寸 法	幅57／奥行き145／高さ25mm (電極ケーブルおよび本体カバーを除く)
	質 量	195g (本体カバーを除く)

[付属品]

充電用ACアダプター		
型 番	BPM010S05B03	
性 能	電源への接続	ジャック接続
	電源周波数	50／60 Hz
	電 源 入 力	AC100V～240V
	定 格 出 力 (電圧・電流)	DC5.0V 2.0A
	出力電圧範囲	DC5.0V ± 5%
外 形	寸 法	長さ84／幅46／高さ32mm (コンセント部およびケーブル部を除く)
	質 量	140g

[オプション]

外部調整ユニット		
型 番	MESU-200	
外 形	寸 法	幅76／奥行き102／高さ22mm (通信ケーブル部を除く)
	質 量	145g (通信ケーブルを除く)

● お使いいただく前に… **MURO ソリューション講習会のご案内**

MURO ソリューションを正しくご理解いただき、お使いいただく為に医療機関にお伺いし、講習会を実施しております。

- 実施日：平日・土曜日
- 対 象：医療従事者
- 会 場：ご希望の場所にお伺いいたします。
- 費 用：無料
- 1時間～ ※ご予約に合わせた設定が可能です。お問い合わせください。

● 正しく使い続けて
いただく為に…

アフターメンテナンスサービス

納入後、MURO ソリューションを適切にお使いいただけるように、弊社営業担当者が医療機関へ定期的にお伺いし、機器の状態を確認させていただきます。不具合がある場合は、代替品をお渡しし、ご相談のうえお預かりした製品を責任を持って修理いたします。

k パシフィックサプライ株式会社

- 大東本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

- 札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
- 広島営業所 TEL.082-535-8300 FAX.082-535-8301
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。
※価格は、消費税8%の税込価格を表記しています。